




MOBILE SURGICAL LAMP 57 LED



**RUMAH LAMPU
(57 LED)**

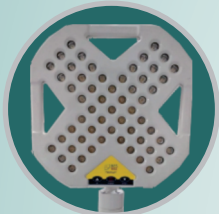

**PEGANGAN
(Terbuat dari plastik)**



**TOMBOL ON/OFF &
SOKET AC POWER**



**4 RODA
(2 roda dengan rem)**



**Pengaturan
tinggi-rendah**



SPESIFIKASI :

KONSTRUKSI	: Bongkar / pasang
TIPE	: BES 207 - 57 LED
TIANG ATAS	: Terbuat dari plat baja, as baja Ø2", pipa baja Ø1 1/4" Cover terbuat dari plastik. Dirakit dengan proses pengelasan
TIANG PENYANGGA	: Terbuat dari pipa baja schdule Ø1 1/2" dengan pegangan terbuat dari plastik. Dirakit dengan proses pengelasan
RUMAH LAMPU	: Terbuat dari aluminium.
RANGKA BAWAH	: Terbuat dari plat baja dilengkapi bumper pengaman dari karet. Dirakit dengan proses pengelasan
KELISTRIKAN	: Input 220VAC, Output 176W
FREKUENSI	: 50/60Hz
INTENSITAS CAHAYA	: 40.000 - 80.000 lux
TEMPERATUR CAHAYA	: 4.000 K
INDEK RENDERING WARNA	: 96
RODA	: 4 roda 4", (2 roda dilengkapi dengan sistem rem)
PENYELESAIAN AKHIR	: Powder coating
UKURAN (MINIMAL)	: 885 (P) x 665 (L) x 1740 (T) mm
UKURAN (MAKSIMAL)	: 1680 (P) x 840 (L) x 2250 (T) mm

TKDN

26,30%

KEMENKES RI AKD : 21603020208

PT. BINA EQUIPMENT SEJAHTERA
Jl. Raya Cibeber KM.11 Kp.Cibungur
RT. 02 RW. 01 Desa Peuteuycondong
Kec. Cibeber, Kab. Cianjur - Jawa Barat
Telp : (0263) - 5502003